



КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ПОРТАТИВНЫЙ
МИНИ-КОМБАЙН

Aurora- Ceutical G7+



Профессиональный японский косметический уход у вас дома!

Aurora Ceutical

AURORA-CEUTICAL G7+

Профессиональное решение эстетических проблем лица, шеи и декольте

AURORA-CEUTICAL G7+

Впервые! В аппарате для эстетической косметологии используется максимальная частота ультразвука – 7,5 МГц

Ионоочищение

Ионообогащение


Ультразвуковая терапия

Инфракрасное излучение




Aurora-Ceutical G7+

Японская компания **Japan Naturele Laboratoires** – ведущий японский производитель профессиональной косметики **LA MENTE**, а также разработчик высокотехнологичного мини-комбайна **AURORA-CEUTICAL** предлагает новую, усовершенствованную версию **AURORA-CEUTICAL G7+**. Этот уникальный аппарат прошел строгую сертификацию не только у себя на родине в Японии, он также имеет все разрешительные документы Российской Федерации*. Впервые аппарат для эстетической косметологии японского производства получил патент в Соединенных Штатах Америки.

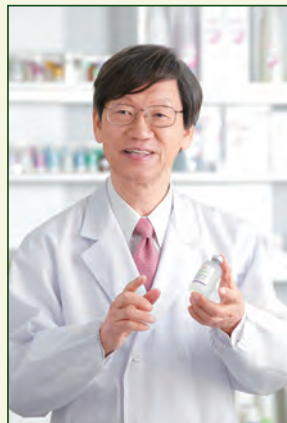

7,5 МГц

В аппарате используется максимальная частота ультразвука в **7,5 МГц!**
Более выраженный лечебный эффект при максимальной безопасности.

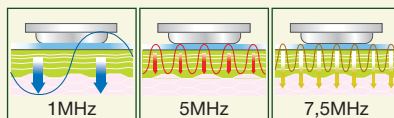

Подвижная рабочая поверхность

Подвижная рабочая поверхность, выполненная из специального титанового сплава, позволяет провести терапию самых труднодоступных участков лица, шеи и декольте.



Aurora-Ceutical G7+



Описание и технические характеристики мини-комбайна

AURORA-CEUTICAL G7+ – это портативный многофункциональный мини-комбайн.

- Аппарат прост в использовании и снабжен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отражаются уровень зарядки и основные параметры проводимой процедуры
- Подвижная титановая рабочая поверхность
- Автоматический контроль за ходом процедуры благодаря встроенным микропроцессору и температурному сенсору (в соответствии со Стандартами Безопасности Японской Ассоциации Эстетической Индустрии)
- Функциональные возможности:
 - ультразвуковое излучение с частотой 7,5 МГц
 - ионоочистение / ионообогащение
 - инфракрасное излучение

Максимальная безопасность

1. Титановая рабочая поверхность.

- Рабочая поверхность (электрод) аппарата **AURORA-CEUTICAL G7+** выполнена из специального титанового сплава, используемого в космических технологиях.
 - Титан обладает великолепной антикоррозийной стойкостью и не подвергается окислению, что позволяет гарантированно избежать образования на рабочей поверхности аппарата слоя окислов, которые могут повредить кожу, вызывать ее раздражение и воспаление.
 - Титан – биологически инертный металл, поэтому при его использовании исключается любая вероятность развития аллергических реакций.
 - Титановая рабочая поверхность легко очищается от остатков косметических препаратов и загрязнений, ее можно дезинфицировать любыми растворами, предназначенными для обработки медицинских инструментов.
2. Аппарат автоматически выключается по истечении запрограммированного времени процедуры.
3. Не рекомендуется пользоваться аппаратом **AURORA-CEUTICAL G7+** во время беременности, при наличии электрокардиостимулятора. При наличии заболеваний кожи и других хронических заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом.



Ультразвук

Ультразвуковое воздействие широко используется в косметологии.

Воздействие УЗ на кожу складывается из механического, физико-химического и теплового эффектов.

1. Механическое действие

УЗ вызывает колебания, за счет которых происходит внутритканевой и внутриклеточный «микромассаж». УЗ улучшает проницаемость кожи и сосудистой стенки для активных компонентов косметических средств, повышая их эффективность.

2. Физико-химическое действие




УЗ повышает проницаемость клеточных мембран, ускоряя обмен веществ в коже, и обеспечивает улучшение снабжения ее питательными веществами, а также выведение токсинов из клеток. Происходит стимуляция синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, ускоряется регенерация и обновление тканей.

3. Тепловое действие

УЗ-колебания вызывают легкое, едва заметное прогревание тканей, что способствует стимуляции микрокровообращения, насыщению клеток кислородом, а также уменьшает отеки, выводит токсины, улучшает цвет лица, укрепляет ткани, повышает тонус и тургор кожи, делает четким овал лица.

ВАЖНО!

Чаще всего в эстетической косметологии используется частота ультразвука – 1 МГц. Преимуществом УЗ, применяемого в **AURORA-CEUTICAL G7+**, является частота – **7,5 МГц**.

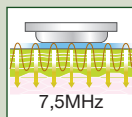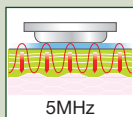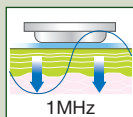

Ультразвуковые волны с частотой **7,5 МГц** позволяют добиваться более выраженных эстетических эффектов при большей безопасности.

Для УЗ-терапии необходимо использовать гелевые или масляные средства, обеспечивающие проведение ультразвука. Высокоэффективные японские косметические средства, вводимые с помощью УЗ, обеспечивают максимальный эффект, так как ультразвук усиливает проникновение в кожу активных компонентов.

Эффект ультразвуковой терапии:

- Мгновенный лифтинг
- Улучшение овала лица
- Повышение упругости и эластичности кожи
- Разглаживание морщин
- Улучшение цвета и рельефа кожи
- Устранение отечности
- Уменьшение эффекта гиперкоррекции при контурной пластике и биоревитализации
- Детоксикация

Ультразвуковой лифтинг

1. Двухфазное очищение:

Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или

Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)




2. Лифтинг

Нанесите достаточное количество **Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)** на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. Во время процедуры можно добавлять гель для свободного скольжения рабочей поверхности аппарата.



AURORA-LIFT UP GEL / ЛИФТИНГОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Препарат с биологически активными компонентами и мощным ревитализирующим действием. Гель интенсивно увлажняет, стимулирует процессы регенерации, обеспечивает выраженный эффект лифтинга. Активные компоненты дополняют и усиливают действие ультразвука, а тот в свою очередь способствует более глубокому их проникновению.

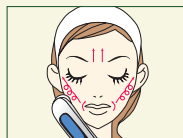

3. Включите прибор, нажав на кнопку «**SONIC**», и осуществляйте непрерывный, медленный массаж кожи лица и шеи от центра к периферии снизу вверх, круговыми движениями по массажным линиям в течение 10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы.

4. Удалите остатки геля **Молочным лосьоном (Milky Lotion)** или **Смягчающим лосьоном (Emollient Lotion)**.

5. Нанесите клеточный экстракт и крем **LA MENTE**.

Ионоочистение и ионообогащение

AURORA-CEUTICAL G7+ имеет 2 режима гальванического тока: ионоочистение «**MC+**» и ионообогащение «**MC-**».

Ионоочистение

Ионоочистение – это идеальная стартовая процедура перед любым косметическим уходом.

Обеспечивает глубокое очищение кожи и удаление загрязнений, которые остаются на ней после обычного умывания (например, остатки косметики, токсичные и канцерогенные вещества, содержащиеся в выхлопных газах и сигаретном дыме).

Регулярное глубокое очищение кожи необходимо современному человеку, живущему в мегаполисе. Особенно в такой процедуре нуждаются люди с проблемной, жирной пористой кожей, акне, повышенной чувствительностью.

Ионоочистение подготавливает кожу к интенсивному лифтингу, питанию, увлажнению, так как способствует более эффективному воздействию активных веществ косметических препаратов.

Косметический эффект:

- Очищение пор от кожного жира и других загрязнений
- Выведение токсинов
- Уменьшение количества комедонов (при курсовом применении)
- Предупреждение появления комедонов
- Улучшение цвета лица
- Повышение эффективности последующих уходов



Ионоочищение

1. Двухфазное очищение:

Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или

Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)



2. Возьмите половинку ватного диска, с помощью специального резинового кольца закрепите его на рабочей поверхности аппарата. Пропитайте ватный диск небольшим количеством **Молочного лосьона (Milky Lotion)**.

MILKY LOTION / МОЛОЧНЫЙ ЛОСЬОН

В японской косметологии лосьон является концентрированным препаратом с выраженным лечебным эффектом и очень легкой текстурой. Непревзойденный по своему составу и свойствам, препарат оказывает мощное омолаживающее, очищающее и лифтинговое действие. В сочетании с аппаратом **AURORA-CEUTICAL G7+** эффективность его многократно усиливается.




3. Включите прибор, нажав два раза на кнопку «**MC -/+**». Установите электрод на подбородок, через каждые 15 секунд перемещайте прибор от центра к периферии, снизу вверх и таким образом обработайте всю поверхность лица в течение 10–15 минут. Каждые 15 секунд раздается звуковой сигнал, после которого электрод следует переместить на следующую зону. Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы! Во время процедуры ватный диск всегда должен оставаться влажным, в случае его высыхания дополнительно смачивайте **Молочным лосьоном (Milky Lotion)**.



4. Затем можете выполнить процедуру ионообогащения или ультразвукового лифтинга.

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем **LA MENTE**.

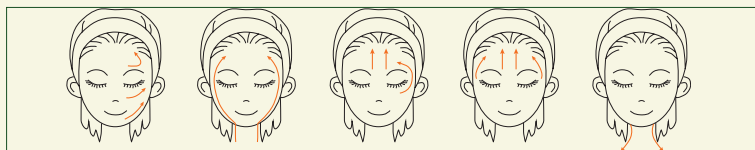

Ионообогащение

Ионообогащение (ионофорез, электрофорез) – насыщение активными косметическими веществами, которые глубоко проникают в кожу, накапливаются в ней в достаточной концентрации и действуют более продолжительно, чем при простом нанесении на кожу. Так, при выполнении процедуры ионообогащения с помощью аппарата **LA MENTE AURORA-CEUTICAL G7+** глубина проникновения средства в кожу увеличивается в 30 раз по сравнению с обычным нанесением.

Ионообогащение проводится в режиме «МС» с использованием препаратов: **Витамин С 5% (C5)**, **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Маска с плацентой и витамином С (C Pla Mask)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**.

C5 / ВИТАМИН С 5%

Осветляет пигментные пятна, устраняет сосудистые звездочки, предотвращает преждевременное старение кожи, повышает ее тонус, выравнивает цвет лица.

C PLA WHITENING / ЭКСТРАКТ ПЛАЦЕНТЫ с ВИТАМИНОМ С

Эликсир красоты, в котором сконцентрированы две энергии: витамин С и экстракт плаценты. Уменьшает количество и глубину морщин, улучшает цвет и качество кожи, обеспечивает мощный лифтинг и увлажнение, осветляет пигментные пятна.

C PLA MASK / МАСКА с ПЛАЦЕНТОЙ и ВИТАМИНОМ С

Эликсир красоты из плацентарного экстракта, витаминов С, А, Е, микроэлементов и фитоэкстрактов. Моментально снимает следы усталости, оказывает выраженное омолаживающее, лифтинговое и увлажняющее действие, освежает и улучшает цвет лица. Идеальна как маска «на выход».



Косметический эффект (зависит от применяемых препаратов):

- Насыщение кожи активными омолаживающими компонентами
- Улучшение кровообращения
- Интенсивное увлажнение и питание
- Повышение упругости и эластичности кожи
- Мощный лифтинг
- Сужение пор
- Выравнивание цвета и рельефа кожи

Ионообогащение

1. Двухфазное очищение:


Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или

Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)

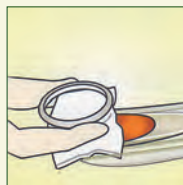

2. С помощью специального резинового кольца закрепите половинку ватного диска на рабочей поверхности аппарата. Пропитайте его одним из препаратов: **Витамин С 5% (C5)**, **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Маска с плацентой и витамином С (C Pla Mask)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**.

PLACENTA 100 / ЭКСТРАКТ ПЛАЦЕНТЫ для ЖИРНОЙ и НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

Экстракт с мощным ревитализирующим действием. Увлажняет и осветляет кожу, обеспечивает ее всеми необходимыми питательными веществами. Замедляет процессы старения и оказывает выраженное омолаживающее действие. Способствует рассасыванию рубцов, создает идеальные условия для заживления поврежденной и воспаленной кожи (акне и постакне), а также для восстановления после пилингов и пластических операций.



PURE 4 ESSENCE / ЭКСТРАКТ : ПЛАЦЕНТА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ЭЛАСТИН, КОЛЛАГЕН

Великолепный комплексный препарат для сохранения молодости и красоты кожи. Увлажняет, смягчает, отбеливает, разглаживает морщинки, обладает мощным регенерирующим и лифтинговым действием. Насыщает кожу необходимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, продлевая ее молодость.



3. Включите прибор, нажмите один раз на кнопку «**MC -/+**». Установите электрод на кожу. Через 15 секунд прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о том, что необходимо переместить электрод на соседнюю зону по массажной линии. Таким образом обработайте всю необходимую зону в течение 10–15 минут.



Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы! Во время процедуры ватный диск всегда должен оставаться влажным, в случае высыхания дополнительно смачивайте его выбранным препаратом.

4. Нанесите на кожу **Молочный лосьон (Milky Lotion)** или **Смягчающий лосьон (Emollient Lotion)**.

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем **LA MENTE**.



Ионоочистение + ультразвук

Процедура комбинирует два режима: ионоочистение и ультразвуковую терапию. Это позволяет провести глубокое очищение кожи в сочетании с мощным лифтингом.

Процедура проводится в режиме «SONIC» + «MC+» с использованием **Молочного лосьона (Milky Lotion)** и **Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)**.

1. Двухфазное очищение:

Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или



Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)

DEEP CLEANSING GEL / ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

Нежный гель с тонким цитрусовым ароматом бережно очищает кожу любого типа, в том числе чувствительную, прекрасно удаляет даже водостойкий макияж. Обогащенный плацентой и церамидами, гель смягчает и увлажняет кожу, устраняет раздражение и тонизирует.

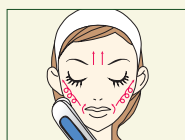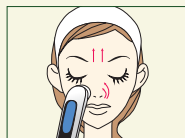

2. Нанесите на кожу **Молочный лосьон (Milky Lotion)**. Затем нанесите небольшое количество **Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)** на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. Во время процедуры можно добавлять гель для свободного скольжения рабочей поверхности аппарата!

3. Последовательно нажмите один раз на кнопку «SONIC», а затем дважды нажмите на кнопку «MC -/+». Осуществите непрерывный медленный массаж кожи лица и шеи от центра к периферии и снизу вверх круговыми движениями по массажным линиям в течение 10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы!

4. Удалите остатки геля **Молочным лосьоном (Milky Lotion)** или **Смягчающим лосьоном (Emollient Lotion)**.

5. В завершение ухода нанесите экстракт и крем **LA MENTE**.



PURE CERAMIDE / ЭКСТРАКТ ЦЕРАМИДОВ

Идеальное средство для ухода за обезвоженной и чувствительной кожей. Экстракт церамидов устраняет раздражение и покраснение, чувство стянутости и шелушение, обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи, придавая ей мягкость и бархатистость. Препятствует преждевременному старению и в сочетании с плацентарным экстрактом оказывает заметный омолаживающий эффект. Мгновенно восстанавливает кожу, поврежденную солнцем и ветром.



Ионообогащение + ультразвук

Процедура позволяет одновременно проводить интенсивный лифтинг, омоложение и ввести глубоко в кожу активные компоненты косметических средств.

Эта процедура проводится в режиме «SONIC» + «MC» с использованием одного из следующих препаратов: **Витамин С 5% (C5)**, **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**.

1. Двухфазное очищение:



Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или

Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)

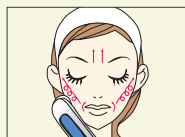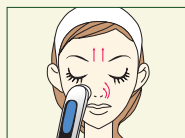

HYALURON EXTRACT 100 / ЭКСТРАКТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Гиалуроновая кислота, важнейший структурный компонент кожи, обладает уникальной влагоудерживающей способностью. Восстанавливая нормальный водный баланс кожи, улучшает ее тонус и упругость, предупреждает появление морщин. Активизирует процессы регенерации, способствует быстрому безрубцовому заживлению микротравм кожи. Используется для интенсивного увлажнения кожи любого типа, профилактики старения, при лечении акне и постакне.



2. Нанесите на кожу один из следующих препаратов:

Витамин С 5% (C5), **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**.

Нанесите достаточное количество **Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)** на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. Во время процедуры можно добавлять гель для свободного скольжения рабочей поверхности аппарата.

3. Последовательно активируйте режим ионообогащения и ультразвука: нажмите на кнопку «SONIC», затем нажмите один раз на кнопку «MC -/+». Осуществляйте непрерывный, но достаточно медленный массаж кожи лица и шеи от центра к периферии и снизу вверх круговыми движениями по массажным линиям в течение 10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы!

4. Удалите остатки геля **Молочным лосьоном (Milky Lotion)** или **Смягчающим лосьоном (Emollient Lotion)**.

5. В завершение ухода нанесите экстракт и крем **LA MENTE**.

Aurora-Ceutical G7+

Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение приводит к локальному нагреву тканей, в результате улучшается кровоток, ускоряется метаболизм, стимулируются процессы регенерации. Инфракрасное излучение также оказывает противовоспалительное, рассасывающее, противоотечное, обезболивающее действие.

Инфракрасное излучение может использоваться как самостоятельно, так и совместно с любым из режимов аппарата (ультразвук, ионочистение, ионообогащение), что многократно усиливает их лечебное действие.

Косметический эффект:

- Улучшение кровообращения и метаболизма
- Противовоспалительное действие
- Ускорение обновления кожи
- Усиление проникновения активных компонентов косметических средств
- Устранение пятен постакне
- Возвращение коже свежести и сияния молодости



Ионообогащение + ультразвук + инфракрасное излучение

Процедура непревзойденного омоложения и интенсивного лифтинга, помогает более глубоко проникновению активных ингредиентов, улучшает цвет и структуру кожи. Рекомендуется в качестве ухода «на выход».

Эта процедура проводится в режиме «**SONIC**» + «**MC**» + «**LAMP**» с использованием одного из следующих препаратов: **Витамин С 5% (C5)**, **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**, **Маска с плацентой и витамином С (C Pla Mask)** для функции ионообогащения и **Лифтинговый гель для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)** для функции ультразвука.

1. Двухфазное очищение:

Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)

или




Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)

+

Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)

MEDICAL CLEAR SKIN SOAP / МЫЛО с АНА-КИСЛОТАМИ

Мыло на основе гликолевой кислоты с эффектом пилинга глубоко очищает, отшелушивает ороговевшие клетки, возвращая коже гладкость и прозрачность. Экстракты плаценты и солодки, сквалан, коллаген и алоэ увлажняют, смягчают и защищают кожу от действия жесткой воды. Подходит для кожи любого типа, особенно комбинированной и жирной.

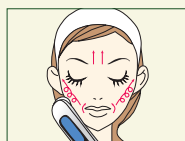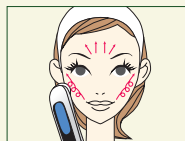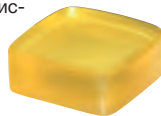

2. Нанесите на кожу один из следующих препаратов:

Витамин С 5% (C5), **Экстракт плаценты с витамином С (C Pla Whitening)**, **Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100)**, **Экстракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100)**, **Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE)**, **Молочный лосьон (Milky Lotion)**.

Нанесите небольшое количество **Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel)** на кожу лица и шеи и впитайте мягкими массажными движениями.

3. Вскройте пакет **Маски с плацентой и витамином С (C Pla Mask)**, уложите ее на лицо и плотно прижмите.

4. Последовательно активируйте режим ионообогащения, ультразвука и инфракрасного излучения, нажав на кнопки: «**SONIC**», «**MC +/-**», «**LAMP**». Осуществляйте непрерывный, медленный массаж круговыми движениями от центра к периферии и снизу вверх, расположив рабочий электрод поверх маски, в течение 10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы! Оставьте маску еще на 10 минут на лице. Затем снимите маску и впитайте остатки препаратов.

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем **LA MENTE**.

Рекомендации по применению различных режимов мини-комбайна Aurora-Ceutical G7+

Процедура	Тип кожи
УЛЬТРАЗВУК + ИОНООЧИЩЕНИЕ	жирная, комбинированная, чувствительная кожа
УЛЬТРАЗВУК + ИОНООБОГАЩЕНИЕ	кожа с первыми признаками старения
ИОНООЧИЩЕНИЕ + ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	комбинированная, нормальная кожа
ИОНООБОГАЩЕНИЕ + ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	сухая, тусклая, обезвоженная кожа
УЛЬТРАЗВУК + ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	стрессовая, «уставшая» кожа
УЛЬТРАЗВУК + ИОНООЧИЩЕНИЕ + ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	жирная проблемная кожа с наличием поствоспалительных пятен
УЛЬТРАЗВУК + ИОНООБОГАЩЕНИЕ + ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ	увядающая кожа, со сниженным тонусом, морщинами


Управление мини-комбайном Aurora-Ceutical G7+ (переключение программ)

1. Активация ультразвукового массажа:




одно нажатие на клавишу

2. Активация ионоочистки:

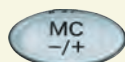

два нажатия на клавишу

3. Активация ионообогащения:

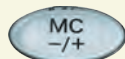

одно нажатие на клавишу

4. Активация инфракрасного излучения:



одно нажатие на клавишу

При комбинации режимов последовательно нажмите на клавиши, соответствующие функциям выбранной программы.

5. Включение и выключение функции голосового сопровождения:



Японская философия домашнего ухода

Очищение

- DEEP CLEANSING GEL
Очищающий гель
- DEEP CLEANSING OIL
Очищающее масло
- MEDICAL CLEAR SKIN SOAP
Мыло с АНА-кислотами
- EMOLLIENT LOTION
Смягчающий лосьон
- MILKY LOTION
Молочный лосьон

Клеточный уход

- PLACENTA 100
Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи
- PURE CERAMIDE
Экстракт керамидов
- HYALURON EXTRACT 100
Экстракт гиалуроновой кислоты
- COLLAGEN EXTRACT 100
Экстракт коллагена
- PURE 4 ESSENCE
Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген

Уход с витамином С

- C 5
Витамин С 5%
- C PLA WHITENING
Экстракт плаценты с витамином С
- C PLA MASK
Маска с плацентой и витамином С

Уход за кожей век

- CIRCULATION EYES
Омоложивающий эликсир для век
- VITA KISS
Крем для кожи вокруг глаз

Специальный уход

- VITAL ESSENCE
Оживляющая эмульсия
- EGFOCUS ESSENCE
Концентрат с эпидермальным фактором роста
- EGFOCUS GEL
Гель с эпидермальным фактором роста
- PLAQUINONE Q10 CREAM
Плацентарный крем с коэнзимом Q10
- NUDIBASE
Солнцезащитный и экстраувлажняющий крем SPF40
- 100% PURE SHEA BUTTER
100% Масло карите

Уход для мужчин

- ACTIV EG SOAP FOR MEN
Мыло Актив EG
- ACTIV EG LOTION FOR MEN
Лосьон Актив EG
- ACTIV EG ESSENCE FOR MEN
Сыворотка Актив EG
- ACTIV EG GEL FOR MEN
Гель Актив EG

Эксплуатация

- Аппарат работает от сети через адаптер
- Перед началом эксплуатации необходимо снять защитную пленку с дисплея аппарата!
- Используйте только сертифицированные косметические препараты, предназначенные для аппаратной косметологии!
- После процедуры рабочую поверхность следует очистить от остатков косметических средств и обработать антисептиком (спирт, хлоргексидин, микроцид и т.д.)

Меры предосторожности:

- Не ронять
- Не прикасаться к прибору мокрыми руками
- Не погружать в жидкость
- Хранить в сухом месте
- Не работать поврежденным прибором!

Обращайте внимание на следующее:

1) Если на дисплее загорается надпись «NO EARTH» и аппарат подает звуковой сигнал, это означает отсутствие заземления. Необходимо проверить:

- снята ли защитная пленка с дисплея,
- достаточно ли количество используемого средства,
- прикасается ли свободная рука косметолога к коже клиента.

2) Хранить прибор необходимо при температуре от 10 до 30 °С, вдали от нагревательных приборов и без попадания прямых солнечных лучей.

Производите ремонт прибора только у специалистов, имеющих разрешение фирмы производителя! При поломке прибора обращайтесь к дистрибьюторам.

Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно!



Подлинную и сертифицированную продукцию
японской марки La Mente можно купить только у косметолога
или в бутиках «Сезон Красоты»
www.seasonkrasoty.ru