

MINDFUL AESTHETIC
Phymongshe

SO FIA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ



Руководство по эксплуатации

В портативном устройстве предусмотрено **четыре** режима воздействия на кожу:

1. Термовоздействие (Heating)

Мягкое тепло активизирует кровообращение, улучшает усвоение активных компонентов косметических средств, улучшает цвет лица.

2. Гальваническое очищение (Cleansing)

При использовании вместе со специальными косметическими средствами позволяет провести глубокое очищение кожи, удалить избыток кожного сала, вывести токсины.

3. Гальваническое обогащение (Nourishing)

Позволяет активным компонентам косметики легко проникать в глубокие слои кожи, значительно повышает эффективность косметических препаратов.

4. Микротоковый вибро-лифтинг (Lifting)

Деликатный вибромассаж тонизирует мышцы лица, усиливает кровоснабжение, подтягивает кожу, позволяет получить мгновенный эффект лифтинга.

Каждый из четырех режимов сопровождается цветотерапией – воздействием на кожу световых лучей определенного цвета, которые излучаются мощными светодиодами (LED), работающими в соответствии с выбранной программой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Многофункциональное устройство SOFIA
- Руководство по эксплуатации
- Кабель MICRO USB для зарядки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы работы	Термовоздействие (Heating) Гальваническое очищение (Cleansing) Гальваническое обогащение (Nourishing) Вибро-лифтинг (Lifting)
Размеры устройства	72 x 72 x 56 мм
Материалы устройства	АБС-ударопрочный полимер, цинк, титановое покрытие
Источник питания	Литий-полимерный аккумулятор 3.7 В / 1,200 мА/ч
Зарядное устройство	D.C. 5.2 В / 500 мА



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Зарядка

Перед первым использованием зарядите устройство. Для полной зарядки аккумулятора требуется около 4–5 часов. Выключите устройство, вставьте конец кабеля MICRO USB в специальное гнездо на корпусе устройства (кабель входит в комплект), другой конец кабеля подключите к внешнему источнику питания (например, USB-адаптер, зарядное устройство для мобильного телефона, портативное зарядное устройство и др.). Для зарядки устройства рекомендуется использовать зарядное устройство с мощностью D.C.5.2 В / 500 мА или более.


Внимание! Во время зарядки устройство работать не будет.

Индикация во время зарядки

Во время зарядки (кабель MICRO USB подключен к устройству) светодиодный индикатор отображает информацию о состоянии заряда аккумулятора:

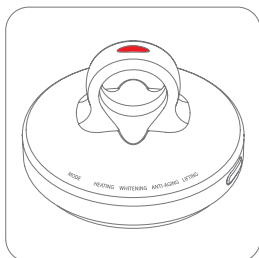

Красный: ЗАРЯЖАЕТСЯ

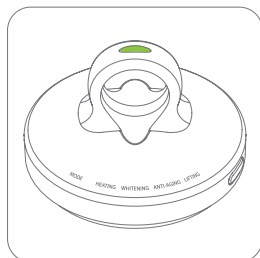

Зеленый: ЗАРЯЖЕН

Внимание!

Не опускайте устройство в воду, не мойте его под водопроводным краном.

Всегда выключайте устройство кнопкой включения / выключения после использования и перед началом зарядки.

2. Включение и выключение

Для включения устройства нажмите кнопку на корпусе.

Переключение режимов осуществляется последовательным нажатием на эту же кнопку.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку.

Включение и выключение устройства, а также переключение режимов работы сопровождается коротким звуковым сигналом.

Выбранный режим работы отображается указателем на корпусе устройства, а также цветом светодиодного индикатора на ручке.

3. Цвет светодиодного индикатора в зависимости от выбранного режима и готовности устройства к работе

Мигающий **БЕЛЫЙ СВЕТ**: подготовка режима нагрева

Постоянный **БЕЛЫЙ СВЕТ**: режим нагрева включен, устройство готово к работе

Мигающий **ЗЕЛЕНый СВЕТ**: подготовка режима гальванического очищения

Постоянный **ЗЕЛЕНый СВЕТ**: режим гальванического очищения включен, устройство готово к работе

Мигающий **КРАСНый СВЕТ**: подготовка режима гальванического обогащения

Постоянный **КРАСНый СВЕТ**: режим обогащения кожи включен, устройство готово к работе

Постоянный **СИНИЙ СВЕТ**: включен режим вибро-лифтинга, устройство готово к работе


4. Низкий заряд батареи

При низком уровне заряда аккумулятора звучит короткий повторяющийся звуковой сигнал.

5. Уход и очистка

Срок службы устройства зависит от правильной эксплуатации и ухода после использования.

Гнездо для подключения зарядного кабеля на корпусе устройства должно быть плотно закрыто специальной заглушкой во время работы прибора, а также при его обработке после использования. Это позволит избежать попадания косметических средств, воды и загрязнений внутрь устройства, что может вызвать его поломку.

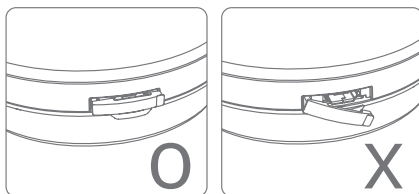


После использования выключите устройство, с помощью ватного диска или салфетки из хлопка удалите остатки косметических препаратов. Затем смочите ватный диск антисептиком и продезинфицируйте рабочую поверхность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Включение нужного режима работы производится последовательным нажатием на кнопку на корпусе устройства. Максимальная продолжительность работы устройства в каждом из режимов составляет 20 минут, после чего устройство автоматически отключается.



Для корректной работы устройства необходимо протереть палец через кольцо, чтобы был контакт с электродом, находящимся внутри кольца.

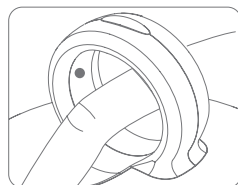

1. Термовоздействие (Heating)

Тепло и светодиодная терапия белым цветом

Нажмите 1 раз на кнопку включения. Светодиодный индикатор начнет мигать белым цветом, рабочая поверхность устройства начнет нагреваться. Время нагрева составляет 90 секунд. После того как светодиодный индикатор загорится постоянным белым светом, можно начинать процедуру.

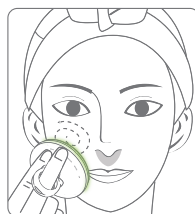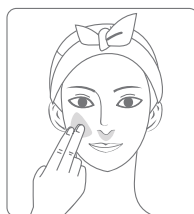

- 1) Удалите макияж, протонируйте кожу лосьоном.
- 2) Нанесите на кожу тонкий слой косметического средства.
- 3) Обработайте кожу, плавно перемещая аппарат по массажным линиям.
- 4) Время процедуры: около 5 минут.

2. Гальваническое очищение (Cleansing)

Тепло, гальванический ток (+), микровибрация, светодиодная терапия зеленым цветом

Дважды нажмите на кнопку включения. Светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, рабочая поверхность устройства начнет нагреваться. Время нагрева составляет 90 секунд. После того как светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым светом, можно начинать процедуру.

- 1) Нанесите равномерно тонким слоем Ароматерапевтическую маску / Aromatic Deep Clean Mask.



- 2) Обработайте кожу, плавно перемещая аппарат круговыми движениями по массажным линиям.

- 3) Время процедуры: около 5 минут.

3. Гальваническое обогащение (Nourishing)

Тепло, гальванический ток (-), микровибрация, светодиодная терапия красным цветом

Нажмите три раза на кнопку включения. Светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом, рабочая поверхность устройства начнет нагреваться. Время нагрева составляет 90 секунд. После того как светодиодный индикатор загорится постоянным красным светом, можно начинать процедуру.

- 1) Нанесите питательные средства для ухода за кожей и обработайте кожу, плавно перемещая аппарат круговыми движениями по массажным линиям, уделяя особое внимание зонам с морщинами.



- 2) Время процедуры: около 5 минут.

4. Микротоковый вибро-лифтинг (Lifting)

Микротоки (+/-, попеременно), микровибрация, светодиодная терапия синим цветом

Нажмите 4 раза на кнопку включения. Светодиодный индикатор загорится синим цветом, устройство готово к использованию

1) Нанесите на кожу тонкий слой косметического средства.

2) Обработайте кожу, плавно перемещая аппарат круговыми движениями по массажным линиям лифтинга.



3) Время процедуры: около 5 минут.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА

1. Наличие имплантированных электронных устройств (кардиостимулятор и т.п.)
2. Патология сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, аритмия)
3. Невриты лицевого нерва
4. Беременность и лактация
5. Острые инфекционные заболевания, в том числе кожи
6. Нарушение целостности кожного покрова, в том числе хронические кожные заболевания в стадии обострения
7. Эпилепсия
8. Онкологические заболевания, новообразования кожи
9. Заболевания крови (гемофилия)
10. Дети младше 12 лет
11. Индивидуальная непереносимость

Примечание

Если клиенту были проведены какие-то медицинские манипуляции (инъекции ботулотоксина, филлеров, установка нитей, пластические операции и др.), то перед использованием прибора SOFIA следует проконсультироваться с врачом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте прибор **SOFIA** только по назначению.
2. Не массируйте кожу слишком сильно, это может вызвать раздражение.
5. Старайтесь не оставлять прибор **SOFIA** под прямыми солнечными лучами и избегайте попадания на прибор воды.
6. Если прибор **SOFIA** не используется более 30 дней, для профилактики работы аккумулятора заряжайте устройство раз в месяц.
7. Не используйте прибор **SOFIA** до полного разряда батареи. Заряжайте устройство вовремя, частый полный разряд аккумулятора ухудшает состояние батареи.
8. Не применяйте абразивные чистящие средства.
9. Оберегайте прибор **SOFIA** от ударов, падений и механических воздействий.
10. Не разбирайте и не чините прибор самостоятельно, в связи с этим может быть отказано в бесплатном гарантийном обслуживании.
11. Держите прибор в недоступном для детей месте.
12. Гнездо для подключения зарядного отверстия должно быть закрыто во время использования устройства, чтобы не допустить попадания внутрь корпуса косметики и воды.

MINDFUL AESTHETIC
Phymongshe

Официальный дистрибьютор – ГК «Мартинес Имидж»

8-800-234-55-68 www.martines.ru